

ERG Thread

ELECTRODE ERG-THREAD

L'ERG-Thread est une électrode cornéenne utilisée pour enregistrer l'électroretinogramme, ERG, provoqué par la stimulation lumineuse de la rétine, humaine ou animale. * Cette électrode est composée d'un filament Nylon recouvert d'argent. Placée sur la cornée, elle permet d'enregistrer les signaux de la rétine.



Un processus informatique opère une mise en forme graphique et numérique des données (électroretinogramme, ERG). Les résultats sont restitués sous une forme précise, lisible et synthétique.

Le médecin dispose ainsi d'un outil fiable et exact permettant d'évaluer la chance de succès d'une opération ou de détecter des maladies génétiques que d'autres méthodes ne font pas apparaître.

L'ERG-Thread de Fabrinal a les avantages suivants:

- Stérilité validée et sûre.
- Câble de transfert intégré (Connexion DIN 1.5 mm)
- Moins de manipulation pour un gain de temps et d'hygiène.

ERG-THREAD, REF : ET-01


Diamètre patches:	12 mm (temporal), 10mm (nasal)
Longueur du filament:	65 mm
Longueur du câble:	1000 mm
Connexion femelle:	DIN 1.50 mm

ERG-THREAD, PACKAGING

L'électrode ERG-Thread est vendue par paire sous pochettes stériles, à usage unique.
Boîtes: 10 paires / 20 pièces.

INSTALLATION

L'électrode est attachée avec le petit patch près du canthus médial et le fil est posé le long du bord inférieur de la paupière. Le grand patch est fixé près du canthus latéral et le câble de connexion est drapé en toute sécurité autour de l'oreille. (Pour plus de détail, veuillez vous référer au mode d'emploi)

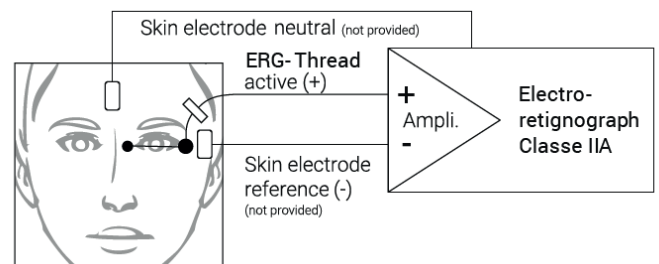

* L'utilisation animale n'est pas réglementée selon la Directive 93/42.



RUE DE LA TUILERIE 42 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
T +41 32 968 09 08 F +41 32 968 42 67 info@fabrinal.ch
www.fabrinal.com

fabrinal
EYE CARE