
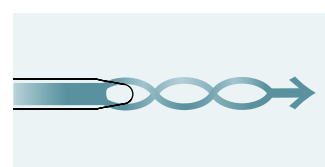
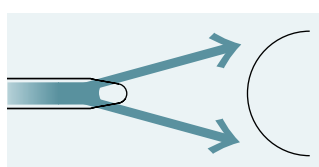


SYSTÈME D'IRRIGATION À USAGE UNIQUE

Le syndrome de pseudoexfoliation (PEX) dans les yeux se caractérise par l'accumulation de PEX dans l'angle irido-cornéen et sur l'éponge trabéculaire. Ces dépôts entravent lentement le flux physiologique de l'humeur aqueuse et entraînent une élévation de la pression intraoculaire (PIO).

Goniowash est une nouvelle technique chirurgicale utilisant la Tran Canula® pour éliminer le matériel PEX afin d'abaisser la PIO après l'opération.

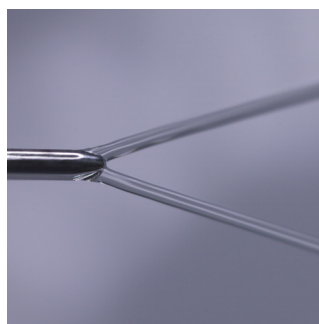

La Tran Canula® est une cannule d'irrigation stérile à usage unique utilisée par le médecin dans un environnement contrôlé, pour éliminer les particules pseudo-exfoliatives déposées dans la chambre antérieure de l'oeil.

Contrairement à une simple canule d'irrigation à jet classique, ce nouvel instrument est caractérisé par deux jets d'eau distincts séparés l'un de l'autre par un angle de 30°. Grâce à sa conception unique et aux lois de la micro-hydrodynamique des fluides, ces deux jets indépendants fusionnent en un seul fuseau liquide, plus puissant, dès lors qu'ils touchent un obstacle.

TRAN CANULA®, TC- 01, SPECIFICATIONS

Référence :	TC- 01
Longueur cannule :	19 mm
Rayon de courbure :	25 mm
Diamètre extérieur :	0.8 mm
Design :	Dr. V.T. Tran

TRAN CANULA® PACKAGING

Sous double blister stérile, à usage unique.	
Emballage :	5 pièces
	205 x 57 x 45 mm

AVANTAGES

- Rapide et facile à utiliser selon la technique Goniowash (<3min).
- Réinstauration et création du flux physiologiquement normal de l'humeur aqueuse.
- Réduit la PIO et les médicaments hypotenseurs en postopératoire.
- Supprime les coûts liés à la réutilisation des instruments.
- Aucune complication selon l'étude de 190 yeux (Dr. Tran, Dr. Mansouri, Dr. Mermoud).